


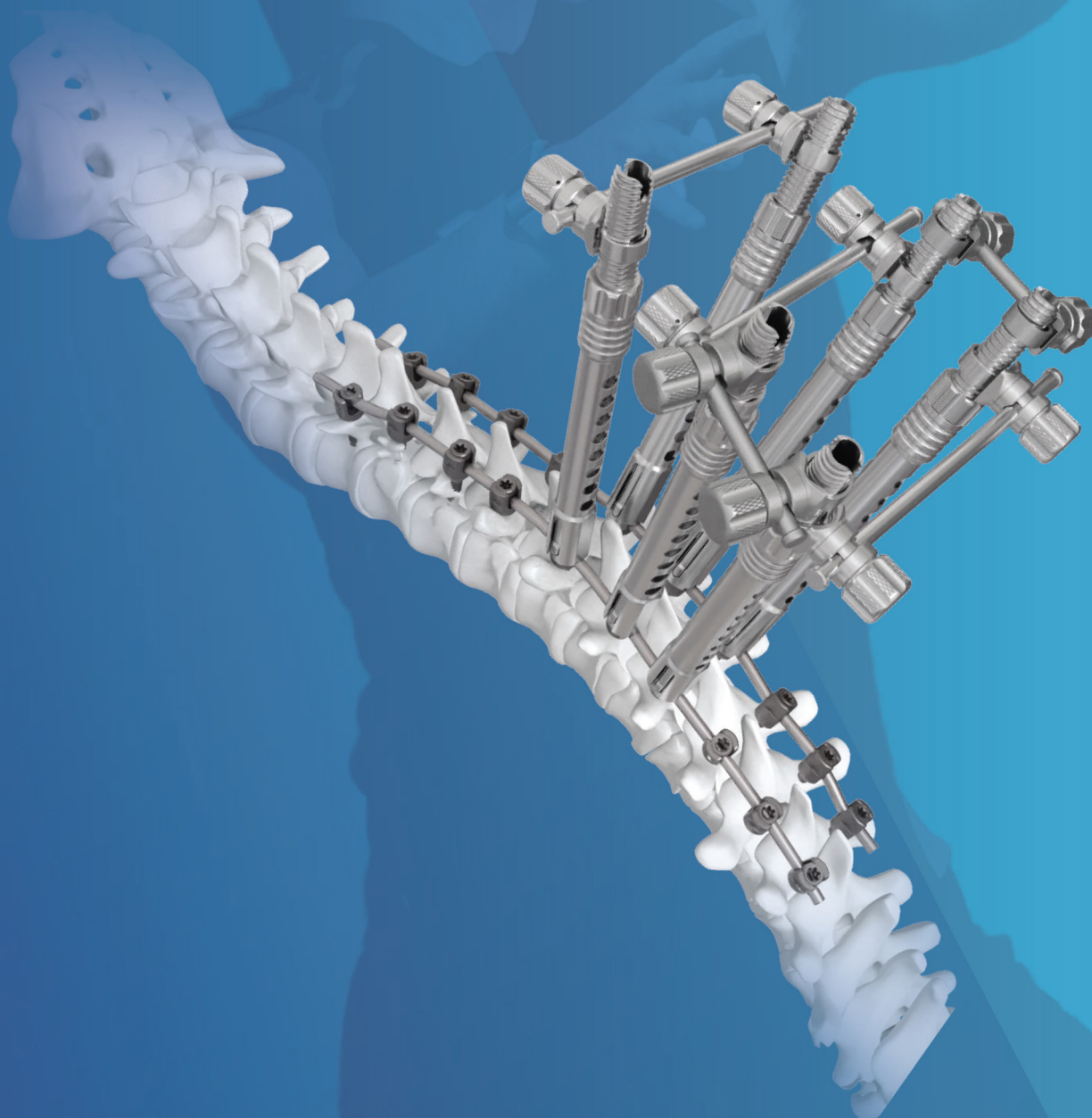

FIJACIÓN POSTERIOR CELLENT CSS 5.5

OVERFIX+
SPINE

CATÁLOGO

SET SISTEMA DE COLUMNA CELLENT CSS 5.5 DE FIJACIÓN POSTERIOR

FIJACIÓN POSTERIOR CELLENT CSS 5.5


CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Diseño modular, simple y de rápida implementación.
- Instrumental de corrección multifuncional.
- Amplio rango de aplicación clínica.

INDICACIONES

Escoliosis, espondilolistesis y deformidad cifótica.

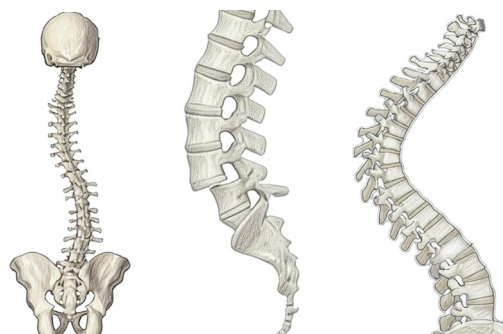


PRODUCTOS COMPATIBLES

- Sistema de implantes CSS 5.5: este set es apto para tornillos pediculares de cabeza corta. El atornillador eléctrico está diseñado exclusivamente para tornillos poliaxiales de cabeza corta.
- Set de instrumental general de columna CSS 5.5 (12003000).

INSTRUCCIONES DEL USO DEL INSTRUMENTAL

A. Extracción de la Camisa Interna (12061001)

Inserte la Pinza de Liberación (12060011) en la Camisa Interna (12061001) hasta que el saliente de la Pinza de Liberación (12060011) entre en contacto con la ranura en U de la Camisa Interna (12061001). A continuación, sujete firmemente el mango de la Pinza de Liberación (12060011); en ese momento, la lengüeta de resorte de la Camisa Interna (12061001) se desenganchará, lo que permitirá extraer la Camisa Interna (12061001) del tornillo pedicular. Durante la extracción, mantenga el mango de la Pinza de Liberación (12060011) firmemente sujeto hasta que el instrumento esté completamente fuera del campo quirúrgico antes de soltarlo. De lo contrario, la Camisa Interna (12061001) podría desprenderse de la Pinza de Liberación (12060011) y lesionar potencialmente al paciente.

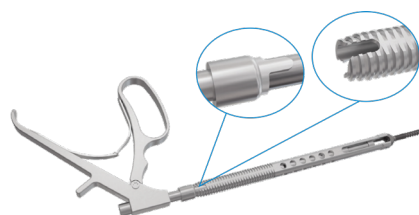

B. Atornillador de Camisa Externa (12060009)

El Atornillador de Camisa Externa (12060009) puede utilizarse para girar las tuercas del Conector Corto (12060007), del Conector Largo (12060008) y de la Camisa Externa (12060006).



C. Atornillador Pedicular Eléctrico (12060003)

Al conectarse a una herramienta motorizada, el Atornillador Pedicular Eléctrico (12060003) permite la inserción rápida de tornillos pediculares multiaxiales estándar, reduciendo el tiempo quirúrgico. Sin embargo, su uso está reservado exclusivamente para cirujanos con experiencia y competencia en la técnica.



FIJACIÓN POSTERIOR CELLENT CSS 5.5

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL




CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	IMAGEN
12060001	1	Barra de prueba (500mm)	
12060002	4	Tuerca de reducción	
12060003	2	Atornillador pedicular eléctrico	
12060004	2	Placa de reducción	
12061001	16	Camisa interna	
12060006	16	Camisa externa	
12060007	4	Conector corto	
12060008	4	Conector largo	
12060009	2	Atornillador de camisa externa	
12060010	1	Atornillador de pre-ajuste	
12060011	2	Pinza de liberación	
12060012	1	Doblador de barras coronal izquierdo	
12060013	1	Doblador de barras coronal derecho	
12061991	1	Caja de instrumental	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

FIJACIÓN POSTERIOR CELLENT CSS 5.5

FIJACIÓN POSTERIOR CELLENT CSS 5.5

CAJA DE INSTRUMENTALES

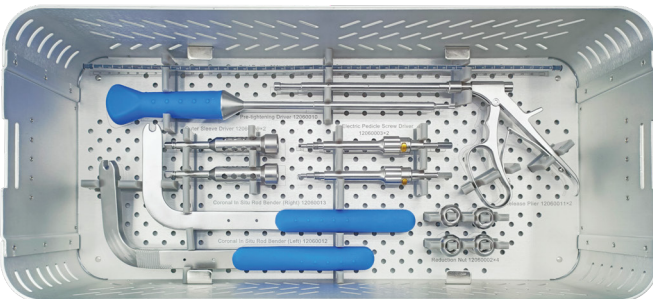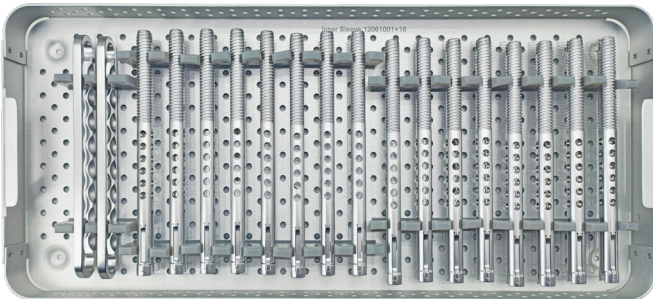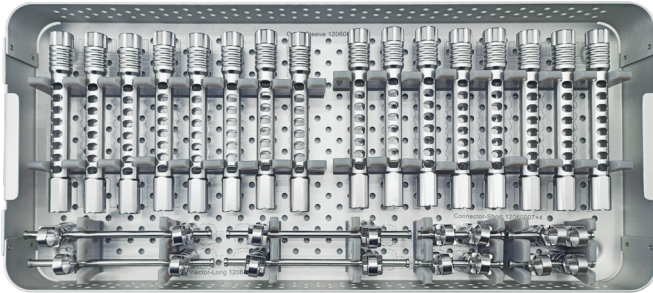

Importado y Distribuido en Argentina por:

bioadvance
LATAM

- Av. Fondo de la Legua 1380, Piso 1, Martinez, Buenos Aires.

Tel: +54 11 7506 8730

bioadvancelatam.com