



PLACA CERVICAL ANTERIOR CAMIC

CATÁLOGO

SISTEMA DE PLACA CERVICAL ANTERIOR

OVERFIX⁺
S P I N E

PLACA CERVICAL ANTERIOR CAMIC

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

BAJO PERFIL

Un grosor de placa de 1.9 mm reduce la posibilidad





VISUALIZACIÓN DEL INJERTO ÓSEO

Fácil de observar la posición de la vértebra, la placa terminal y el injerto óseo




TRES OPCIONES DE FIJACIÓN

Las múltiples opciones de tornillos proporcionan flexibilidad intraoperatoria. Las combinaciones de construcción fija, de ángulo variable e híbrida.

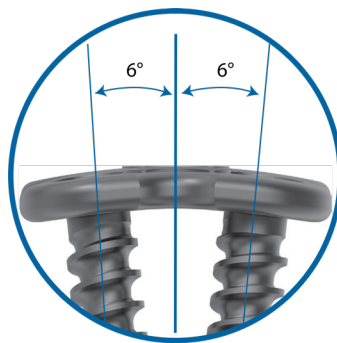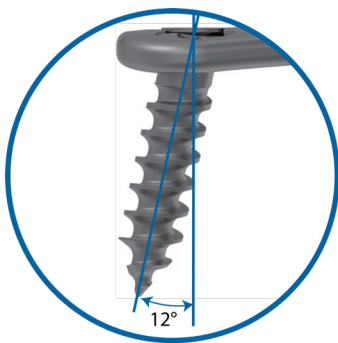

ÁNGULO FIJO

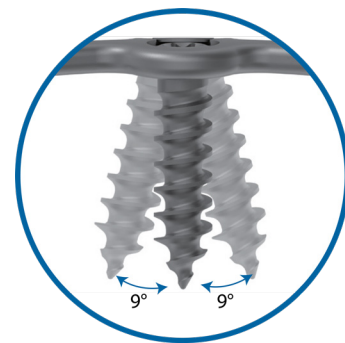

ÁNGULO VARIABLE

INDICACIONES

Inestabilidades de la columna cervical (C2-C7) asociadas con:

- Fracturas/dislocaciones
- Enfermedades degenerativas
- Tumores
- Enfermedades congénitas

PLACA CERVICAL ANTERIOR CAMIC

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE ÁNGULO VARIABLE

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
51034011	Φ4.0 x 11mm	Tornillo de Ángulo Variable, Φ4.0 x 11mm	
51014013	Φ4.0 x 13mm	Tornillo de Ángulo Variable, Φ4.0 x 13mm	
51014015	Φ4.0 x 15mm	Tornillo de Ángulo Variable, Φ4.0 x 15mm	
51014017	Φ4.0 x 17mm	Tornillo de Ángulo Variable, Φ4.0 x 17mm	
51014019	Φ4.0 x 19mm	Tornillo de Ángulo Variable, Φ4.0 x 19mm	
51014511	Φ4.5 x 11mm	Tornillo de Ángulo Variable, Φ4.5 x 11mm	
51014513	Φ4.5 x 13mm	Tornillo de Ángulo Variable, Φ4.5 x 13mm	
51014515	Φ4.5 x 15mm	Tornillo de Ángulo Variable, Φ4.5 x 15mm	
51014517	Φ4.5 x 17mm	Tornillo de Ángulo Variable, Φ4.5 x 17mm	
51014519	Φ4.5 x 19mm	Tornillo de Ángulo Variable, Φ4.5 x 19mm	
51014521	Φ4.5 x 21mm	Tornillo de Ángulo Variable, Φ4.5 x 21mm	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACA CERVICAL ANTERIOR CAMIC

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE ÁNGULO FIJO

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
51024011	Φ4.0 x 11mm	Tornillo de Ángulo Fijo, Φ4.0 x 11mm	
51024013	Φ4.0 x 13mm	Tornillo de Ángulo Fijo, Φ4.0 x 13mm	
51024015	Φ4.0 x 15mm	Tornillo de Ángulo Fijo, Φ4.0 x 15mm	
51024017	Φ4.0 x 17mm	Tornillo de Ángulo Fijo, Φ4.0 x 17mm	
51024019	Φ4.0 x 19mm	Tornillo de Ángulo Fijo, Φ4.0 x 19mm	
51024511	Φ4.5 x 11mm	Tornillo de Ángulo Fijo, Φ4.5 x 11mm	
51024513	Φ4.5 x 13mm	Tornillo de Ángulo Fijo, Φ4.5 x 13mm	
51024515	Φ4.5 x 15mm	Tornillo de Ángulo Fijo, Φ4.5 x 15mm	
51024517	Φ4.5 x 17mm	Tornillo de Ángulo Fijo, Φ4.5 x 17mm	
51024519	Φ4.5 x 19mm	Tornillo de Ángulo Fijo, Φ4.5 x 19mm	
51024521	Φ4.5 x 21mm	Tornillo de Ángulo Fijo, Φ4.5 x 21mm	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACA CERVICAL ANTERIOR CAMIC

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO AUTOPERFORANTE

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
51034011	Φ4.0 x 11mm	Tornillo Autoperforante, Φ4.0 x 11mm	
51034013	Φ4.0 x 13mm	Tornillo Autoperforante, Φ4.0 x 13mm	
51034015	Φ4.0 x 15mm	Tornillo Autoperforante, Φ4.0 x 15mm	
51034017	Φ4.0 x 17mm	Tornillo Autoperforante, Φ4.0 x 17mm	
51034019	Φ4.0 x 19mm	Tornillo Autoperforante, Φ4.0 x 19mm	
51034511	Φ4.5 x 11mm	Tornillo Autoperforante, Φ4.5 x 11mm	
51034513	Φ4.5 x 13mm	Tornillo Autoperforante, Φ4.5 x 13mm	
51034515	Φ4.5 x 15mm	Tornillo Autoperforante, Φ4.5 x 15mm	
51034517	Φ4.5 x 17mm	Tornillo Autoperforante, Φ4.5 x 17mm	
51034519	Φ4.5 x 19mm	Tornillo Autoperforante, Φ4.5 x 19mm	
51034521	Φ4.5 x 21mm	Tornillo Autoperforante, Φ4.5 x 21mm	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACA CERVICAL ANTERIOR CAMIC

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE PLACA CERVICAL ANTERIOR

CÓDIGO	ORIFICIOS	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
51004210	4 orificios	21mm largo	Placa Cervical Anterior, 4 orificios, 21mm de largo	
51004230	4 orificios	23mm largo	Placa Cervical Anterior, 4 orificios, 23mm de largo	
51004250	4 orificios	25mm largo	Placa Cervical Anterior, 4 orificios, 25mm de largo	
51004275	4 orificios	27.5mm largo	Placa Cervical Anterior, 4 orificios, 27.5mm de largo	
51004300	4 orificios	30mm largo	Placa Cervical Anterior, 4 orificios, 30mm de largo	
51004325	4 orificios	32.5mm largo	Placa Cervical Anterior, 4 orificios, 32.5mm de largo	
51004350	4 orificios	35mm largo	Placa Cervical Anterior, 4 orificios, 35mm de largo	
51004375	4 orificios	37.5mm largo	Placa Cervical Anterior, 4 orificios, 37.5mm de largo	
51006350	6 orificios	35mm largo	Placa Cervical Anterior, 6 orificios, 35mm de largo	
51006375	6 orificios	37.5mm largo	Placa Cervical Anterior, 6 orificios, 37.5mm de largo	
51006400	6 orificios	40mm largo	Placa Cervical Anterior, 6 orificios, 40mm de largo	
51006425	6 orificios	42.5mm largo	Placa Cervical Anterior, 6 orificios, 42.5mm de largo	
51006450	6 orificios	45mm largo	Placa Cervical Anterior, 6 orificios, 45mm de largo	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACA CERVICAL ANTERIOR CAMIC

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE PLACA CERVICAL ANTERIOR

CÓDIGO	ORIFICIOS	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
51006475	6 orificios	47.5mm largo	Placa Cervical Anterior, 6 orificios, 47.5mm de largo	
51006500	6 orificios	50mm largo	Placa Cervical Anterior, 6 orificios, 50mm de largo	
51008525	8 orificios	52.5mm largo	Placa Cervical Anterior, 8 orificios, 52.5mm de largo	
51008550	8 orificios	55mm largo	Placa Cervical Anterior, 8 orificios, 55mm de largo	
51008575	8 orificios	57.5mm largo	Placa Cervical Anterior, 8 orificios, 57.5mm de largo	
51008600	8 orificios	60mm largo	Placa Cervical Anterior, 8 orificios, 60mm de largo	
51008625	8 orificios	62.5mm largo	Placa Cervical Anterior, 8 orificios, 62.5mm de largo	
51008650	8 orificios	65mm largo	Placa Cervical Anterior, 8 orificios, 65mm de largo	
51008675	8 orificios	67.5mm largo	Placa Cervical Anterior, 8 orificios, 67.5mm de largo	
51008700	8 orificios	70mm largo	Placa Cervical Anterior, 8 orificios, 70mm de largo	
51008725	8 orificios	72.5mm largo	Placa Cervical Anterior, 8 orificios, 72.5mm de largo	
51000750	10 orificios	75mm largo	Placa Cervical Anterior, 10 orificios, 75mm de largo	
51000775	10 orificios	77.5mm largo	Placa Cervical Anterior, 10 orificios, 77.5mm de largo	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACA CERVICAL ANTERIOR CAMIC

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE PLACA CERVICAL ANTERIOR

CÓDIGO	ORIFICIOS	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
51000800	10 orificios	80mm largo	Placa Cervical Anterior, 10 orificios, 80mm de largo	
51000825	10 orificios	82.5mm largo	Placa Cervical Anterior, 10 orificios, 82.5mm de largo	
51000850	10 orificios	85mm largo	Placa Cervical Anterior, 10 orificios, 85mm de largo	
51000875	10 orificios	87.5mm largo	Placa Cervical Anterior, 10 orificios, 87.5mm de largo	
51000900	10 orificios	90mm largo	Placa Cervical Anterior, 10 orificios, 90mm de largo	
51002950	12 orificios	95mm largo	Placa Cervical Anterior, 12 orificios, 95mm de largo	
51002100	12 orificios	100mm largo	Placa Cervical Anterior, 12 orificios, 100mm de largo	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACA CERVICAL ANTERIOR CAMIC

CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL

Consultar disponibilidad según país o región

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	IMAGEN
12006001	1	Portaplaca	
12006002	1	Guía de Broca para Tornillo de Ángulo Variable	
12006003	1	Guía de Broca para Tornillo de Ángulo Fijo	
12006004	1	Macho 4.0	
12006005	1	Macho 4.5	
12006006	1	Porta Pin de Prefijación	
12006007	2	Pin de Prefijación	
12006008	1	Medidor de Profundidad	
12006009	1	Macho Ajustable	
12006010	1	Atornillador	
12006011	1	Pre-atornillador	
12006012	1	Broca Ajustable	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACA CERVICAL ANTERIOR CAMIC

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL


CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	IMAGEN
12006013	1	Tope de Broca	
12006014	1	Broca	
12006015	1	Tope de Atornillador	
12006016	1	Distractor	
12006017	1	Mango de Conexión Rápida	
12006018	1	Doblador de Placas	
12006019	1	Atornillador para Pin de Distracción	
12006020	2	Pin de Distracción	
12016010	Opcional	Punzón	
12016010	Opcional	Distractor Bidireccional	
12006022	Opcional	Pin de Prefijación Roscado	
12006991	1	Caja de Instrumental	
12006992	1	Caja de Implantes	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.


PLACA CERVICAL ANTERIOR CAMIC

PLACA CERVICAL ANTERIOR CAMIC

DISPOSICIÓN DE IMPLANTES

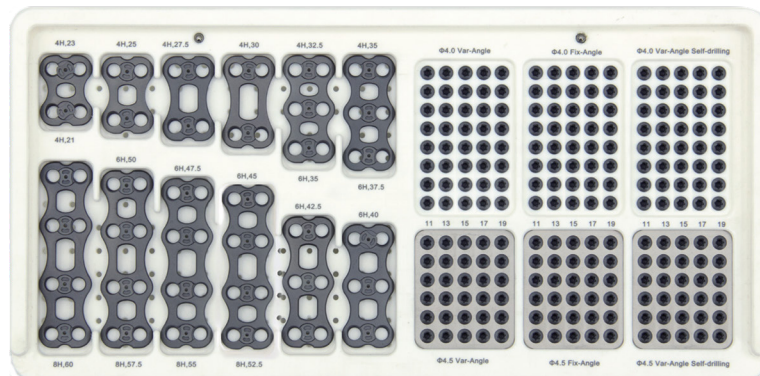

DISPOSICIÓN DE IMPLANTES

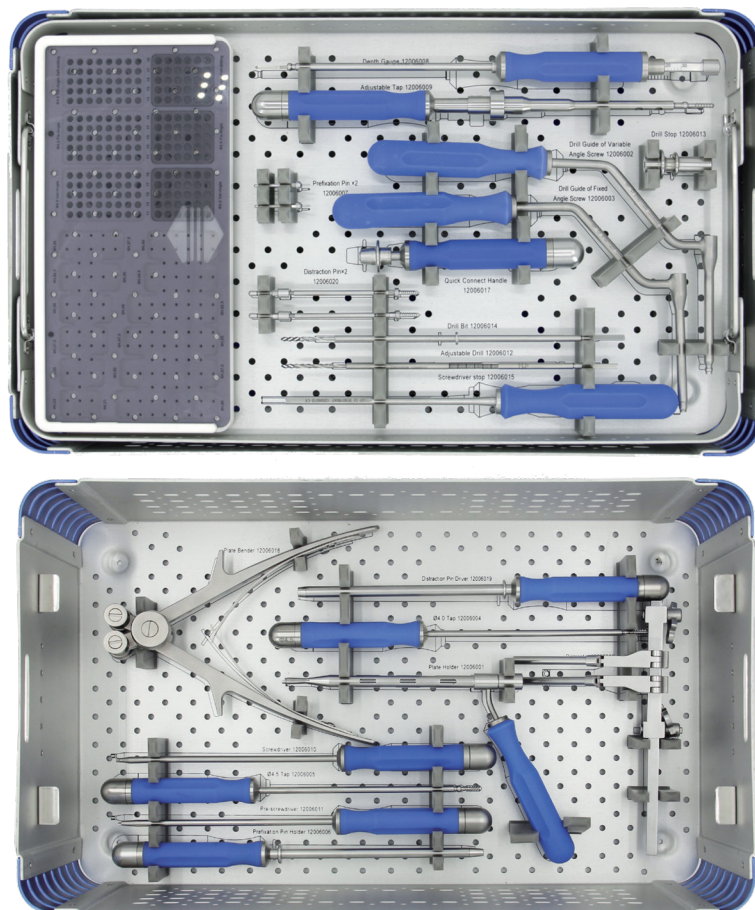

Importado y Distribuido en Argentina por:

bioadvance
LATAM

- Av. Fondo de la Legua 1380, Piso 1, Martinez, Buenos Aires.

Tel: +54 11 7506 8730

bioadvancelatam.com



PLACA CERVICAL ANTERIOR CAMIC

TÉCNICA QUIRÚRGICA

SISTEMA DE PLACA CERVICAL ANTERIOR

OVERFIX⁺
S P I N E


PLACA CERVICAL ANTERIOR CAMIC

TÉCNICA QUIRÚRGICA | PLACA CERVICAL ANTERIOR CAMIC

SECUENCIA

INCISIÓN Y EXPOSICIÓN

Se coloca al paciente en posición dorsal con la cabeza en ligera extensión. La parte posterior de la columna cervical es apoyada para establecer y mantener la lordosis cervical normal.

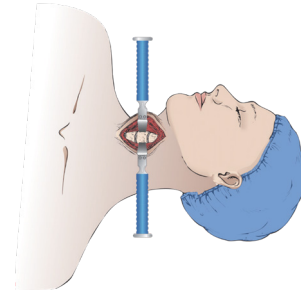

Después de que la columna vertebral cervical haya sido expuesta, los músculos longus colli se elevan y las hojas de los retractores autoestáticos medial/lateral con "pie ranurado" se colocan de forma segura. Luego, se coloca el retractor autoestático longitudinal para proporcionar una visualización óptima.



DESCOMPRESIÓN / FUSIÓN

Exponer la región cervical para lograr una visualización quirúrgica óptima. Confirmar el segmento quirúrgico e insertar el macho de auto perforación en la línea media de las vértebras adyacentes.

Utilice un distractor para la distracción. Retirar el disco degenerativo y la vértebra para liberar la compresión. Después de insertar el injerto óseo o la jaula, retirar el distractor.




PLACA CERVICAL ANTERIOR CAMIC

TÉCNICA QUIRÚRGICA | PLACA CERVICAL ANTERIOR CAMIC

SECUENCIA

SELECCIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACAS

Seleccionar el tamaño adecuado de la placa. Utilizar un Pasador de Prefijación para fijar temporalmente. La placa puede ser moldeada aún más si es necesario.

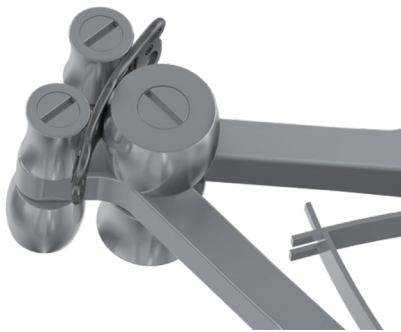

Disminuir Lordosis



Aumentar Lordosis

PLACA CERVICAL ANTERIOR CAMIC

TÉCNICA QUIRÚRGICA | PLACA CERVICAL ANTERIOR CAMIC

SECUENCIA

PERFORACIÓN

Coloque la guía de broca ángulo variable / guía de broca de ángulo fijo en el agujero del tornillo. Presione hacia abajo la guía de broca. Perfore con la broca. Si es necesario, se puede usar el taladro ajustable junto con el tope de taladro.



ROSCA

Retire la guía de broca, rosque con el macho del tamaño adecuado. Los tornillos también pueden insertarse sin roscar.

INSERCIÓN DE TORNILLOS

Inserte los tornillos. Retire el Pasador de Prefijación e inserte los tornillos restantes. Inserte el tornillo lo suficientemente profundo y apriételo.



CONFIGURACIÓN DEL MECANISMO DE BLOQUEO

Gire el clip 90 grados utilizando el destornillador, luego el tornillo puede ser finalmente fijado.



CIERRE DE LA INCISIÓN

Limpie, cierre la incisión y termine