

DISPOSITIVOS MÉDICOS

bicaadvance®

— LATAM —



RETRACTOR LUMBAR

OVERFIX+
S P I N E

CATÁLOGO

SET DE INSTRUMENTAL RETRACTOR LUMBAR

RETRACTOR LUMBAR

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL


CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	IMAGEN
31090253	1	Separador	
31090254	1	Hoja longitudinal - Izquierda 50	
31090255	1	Hoja longitudinal - Izquierda 70	
31090256	1	Hoja longitudinal - Izquierda 90	
31090257	1	Hoja longitudinal - Derecha 50	
31090258	1	Hoja longitudinal - Derecha 70	
31090259	1	Hoja longitudinal - Derecha 90	
31090260	1	Hoja transversal - 50	
31090261	1	Hoja transversal - 70	
31090262	1	Hoja transversal - 90	
31090263	1	Conector	
31090264	1	Destornillador hexagonal	
31090241	1	Destornillador de cabeza plana	
12065991	1	Caja de instrumental	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

RETRACTOR LUMBAR

RETRACTOR LUMBAR

CAJAS DE INSTRUMENTAL

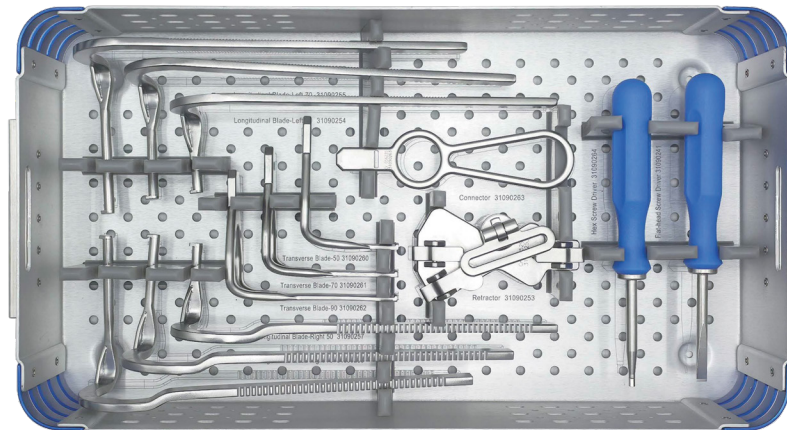

Importado y Distribuido en Argentina por:

bioadvance
DISPOSITIVOS MÉDICOS
LATAM

- Av. Fondo de la Legua 1380, Piso 1, Martinez, Buenos Aires.

Tel: +54 11 7506 8730

bioadvancelatam.com

DISPOSITIVOS MÉDICOS

bicaadvance[®]

— LATAM —



RETRACTOR LUMBAR

OVERFIX⁺
S P I N E

TÉCNICA QUIRÚRGICA

SET DE INSTRUMENTAL RETRACTOR LUMBAR

RETRACTOR LUMBAR

TÉCNICA QUIRÚRGICA | RETRACTOR LUMBAR


SECUENCIA

USO PREVISTO, IMPLANTES E INSTRUMENTOS COMPATIBLES

El Set de Instrumentos de Separación Lumbar está diseñado para utilizarse con el dispositivo de fusión intersomática Coales-T y su set de instrumentos. Su función es establecer un corredor quirúrgico para la preparación del espacio intervertebral e inserción del implante en procedimientos de fusión intersomática lumbar transforaminal mínimamente invasiva (MIS-TLIF).


01. POSICIÓN DEL PACIENTE

Se coloca al paciente en decúbito prono sobre una mesa adecuada para fluoroscopia.

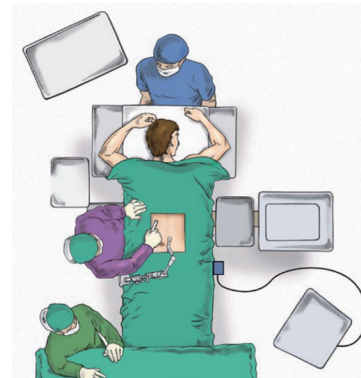

02. LOCALIZACIÓN Y DISECCIÓN ROMA

Se realiza una incisión en el segmento quirúrgico previsto y se lleva a cabo una disección roma inicial hasta que las articulaciones facetarias queden expuestas.

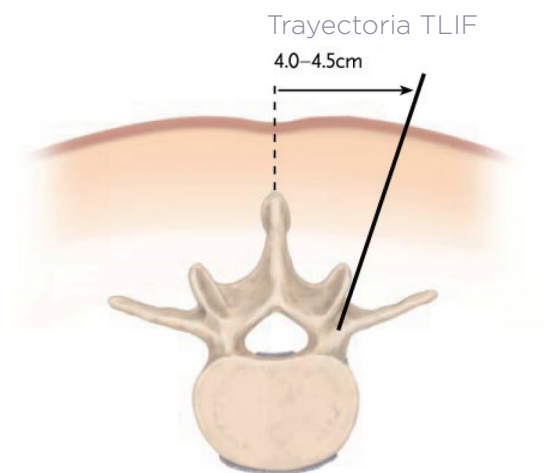


RETRACTOR LUMBAR

TÉCNICA QUIRÚRGICA | RETRACTOR LUMBAR

SECUENCIA

03. ENSAMBLAR EL SEPARADOR

Utilice el Destornillador de cabeza plana (31090241) para retirar el tornillo de la perilla y extraer la perilla. Seleccione el tamaño adecuado de la Hoja Transversal (31090260-31090262), presione el botón de la hoja transversal en el Separador (31090253) e inserte la Hoja Transversal.

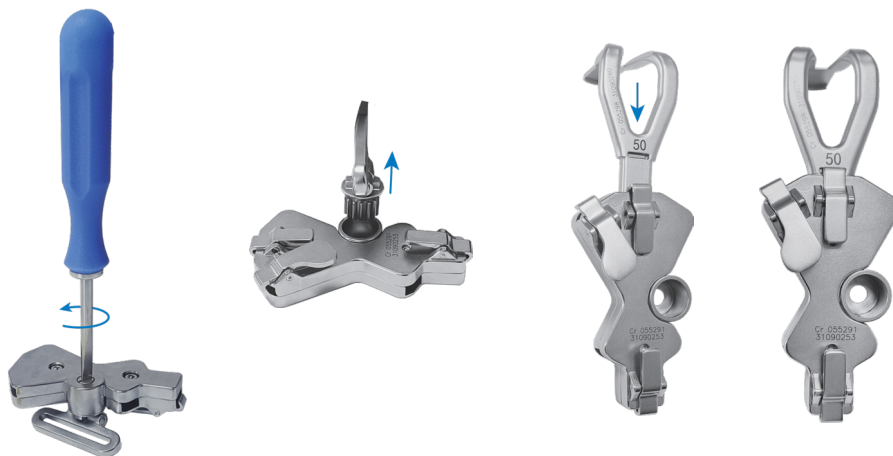

Seleccione el tamaño adecuado de la Hoja Longitudinal (31090254-31090259), presione el botón de la hoja longitudinal en el Separador (31090253) e inserte la Hoja Longitudinal. Luego, vuelva a insertar la perilla y asegúrela con el tornillo de la perilla utilizando un Destornillador de cabeza plana (31090241).




RETRACTOR LUMBAR


TÉCNICA QUIRÚRGICA | RETRACTOR LUMBAR

SECUENCIA


Asegúrese de que las Hojas Longitudinales se inserten con una longitud expuesta consistente.

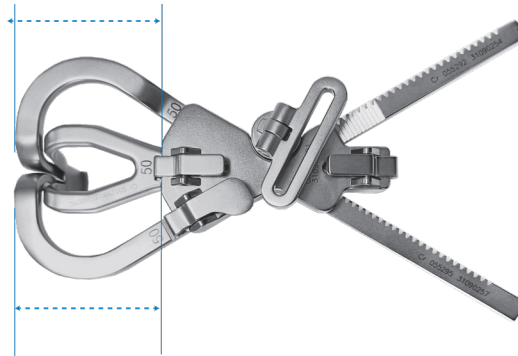

Presione el botón del mango del conector en el Separador (31090253) y acople el Conector (31090263).

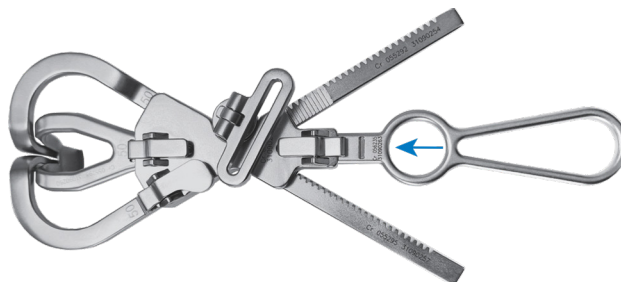

Presione el botón de la hoja longitudinal en el Separador (31090253) para juntar las Hojas Longitudinales con la Hoja Transversal (31090260-31090262).

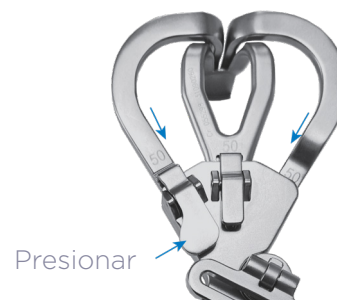

RETRACTOR LUMBAR

TÉCNICA QUIRÚRGICA | RETRACTOR LUMBAR

SECUENCIA

04. INSTALACIÓN DEL SEPARADOR

Inserte el Separador (31090253) ensamblado en la incisión y gire la perilla en sentido horario para expandir la incisión hasta lograr el efecto deseado.




05. RETIRAR EL SEPARADOR

Realice la preparación intervertebral e inserte el dispositivo de fusión intersomática utilizando los métodos convencionales. Asegure con tornillos pediculares y, posteriormente, retire el sistema separador.

06. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN

Presione el botón del conector y retire el Conector (31090263).

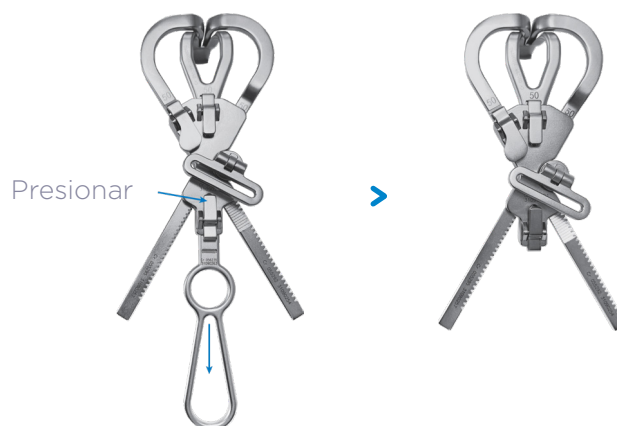

RETRACTOR LUMBAR

TÉCNICA QUIRÚRGICA | RETRACTOR LUMBAR

SECUENCIA

Presione el botón de la hoja transversal y retire la Hoja Transversal (31090260-31090262).



Utilice un Destornillador de cabeza plana (31090241) para retirar el tornillo de la perilla y desprender la perilla. Retire la Hoja Longitudinal (31090254-31090259).



Utilice un Destornillador hexagonal (31090264) para retirar los tornillos de fijación del Separador (31090253) y abra la placa de cubierta del Separador (31090253). Limpie y desinfecte/esterilice los instrumentos desmontados.

