


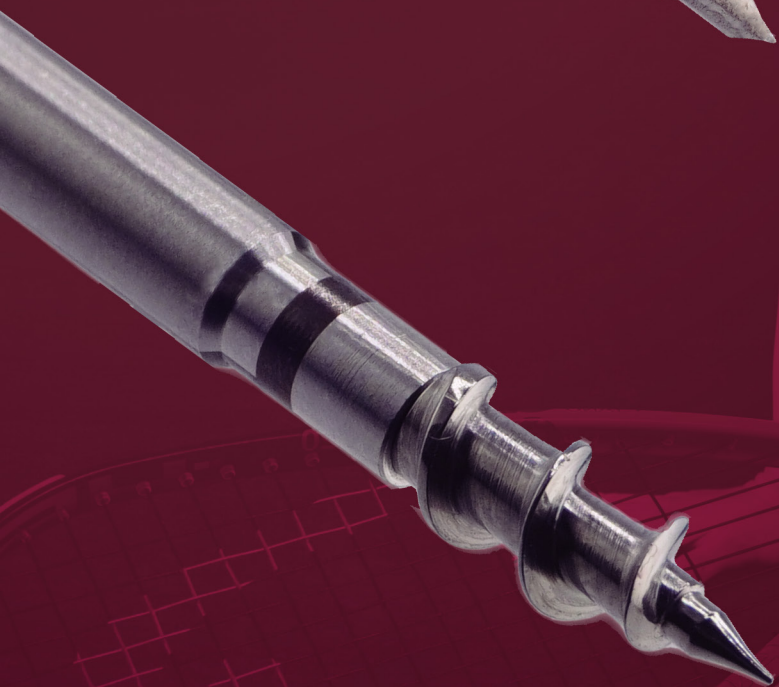

FASTABLE™ TITANIUM SUTURE ANCHOR

TÉCNICA QUIRÚRGICA

ANCLA DE FIJACIÓN DE PEEK CON O SIN SUTURA

ANCLA DE FIJACIÓN DE TITANIO CON O SIN SUTURA

FASTABLE™ TITANIUM SUTURE ANCHOR

CONTENIDO

FASTABLE TITANIUM SUTURE ANCHOR

Características	03
-----------------------	----

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Ancla de Titanio Fastable	04
---------------------------------	----

CODIFICACIÓN

Ancla de Titanio Fastable	05
---------------------------------	----

Instrumental	06
--------------------	----



FASTABLE™ TITANIUM SUTURE ANCHOR

CARACTERÍSTICAS

DISEÑO

El diseño autorroscante elimina la necesidad de realizar perforaciones previas. Se atornilla fácilmente después del impacto del martillo óseo.



ERGONOMÍA

El diseño ergonómico asegura un proceso de atornillado de anclajes fácil y sin esfuerzo.

SUTURA

La nueva sutura especializada UHS Fiber® para medicina deportiva está elaborada con fibras de UHMWPE (Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular) de 16 hebras, ofreciendo propiedades mecánicas líderes a nivel internacional para un rendimiento excepcional.



ESPECIFICACIONES

Disponible en varios diámetros de 2.0 mm a 5.0 mm. Ofrece anclajes de sutura simples y dobles. Cumple con los requisitos de fijación para múltiples aplicaciones clínicas, incluyendo hombro, codo, muñeca, rodilla, tobillo y pie.




FASTABLE™ TITANIUM SUTURE ANCHOR

TÉCNICA QUIRÚRGICA | ANCLA DE TITANIO SIN NUDOS

SECUENCIA


01. POSICIONAMIENTO DE ANCLA

Selecciona el tamaño adecuado del ancla, localiza la posición objetivo. Gira el ancla en el sentido de las agujas del reloj a lo largo del túnel óseo hasta que la línea de marcado esté al ras de la superficie ósea o ligeramente hundida en el hueso.

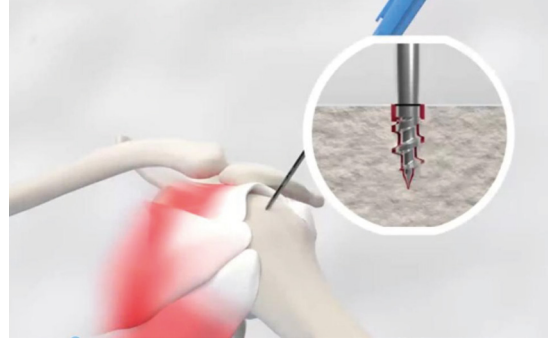

02. LIBERACIÓN DE ANCLA

Libera la sutura y retira el mango. Se completó la implantación del ancla de sutura.

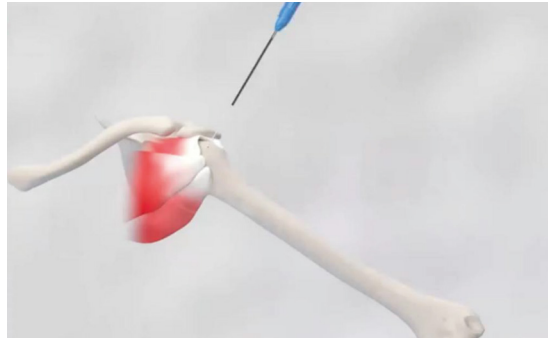


FASTABLE™ TITANIUM SUTURE ANCHOR

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE ANCLA FASTABLE

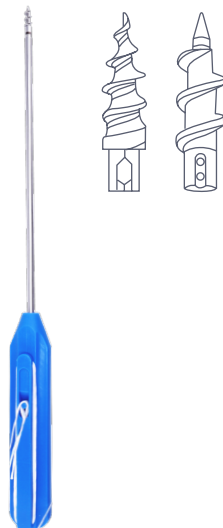CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
Familia Fastable Titanium Suture Anchor Sin Aguja				
91-7901-200-41	Hombro Rodilla Tobillo	2.0 x 4mm	Ancla de Titanio con Sutura, 2.0 x 4 mm, con Sutura Ultra Resistente #0, 900mm, Blanca	
91-7902-291-22	Hombro Rodilla Tobillo	2.9 x 12 mm	Ancla de Titanio con Sutura, 2.9 x 12 mm, con Sutura Ultra Resistente #2, 1200mm, Blanca	
91-7902-351-32	Hombro Rodilla Tobillo	3.5 x 13 mm	Ancla de Titanio con Sutura, 3.5 x 13 mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000mm, Blanca y Blanca-Azul	
91-7903-501-63	Hombro Rodilla Tobillo	5.0 x 16 mm	Ancla de Titanio con Sutura, 5.0 x 16 mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000mm, Blanca y Blanca-Azul	
Familia Fastable Titanium Suture Anchor Con Aguja				
91-7904-200-41	Hombro Rodilla Tobillo	2.0 x 4 mm	Ancla de Titanio con Sutura, 2.0x4mm, con Sutura Ultra Resistente #0, 900mm, Blanca, con Aguja Ø arco 8x12mm	
91-7904-291-21	Hombro Rodilla Tobillo	2.9 x 12 mm	Ancla de Titanio con Sutura, 2.9x12mm, con Sutura Ultra Resistente #2, 1000mm, Blanca-Azul, con Aguja Ø arco 11x17mm	
91-7904-351-32	Hombro Rodilla Tobillo	3.5 x 13 mm	Ancla de Titanio con Sutura, 3.5x13mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000mm, Blanca y Blanca-Azul, con Aguja Ø arco 11x17mm	
91-7904-501-62	Hombro Rodilla Tobillo	5.0 x 16 mm	Ancla de Titanio con Sutura, 5.0x16mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000mm, Blanca y Blanca-Azul, con Aguja Ø arco 11x17mm	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

FASTABLE™ TITANIUM SUTURE ANCHOR

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
91-9805-000-89	2.0 mm	Perforadora para Ancla de Titanio con Sutura 2.0mm
91-7805-000-68	2.9 mm	Broca Escalonada de 2.9mm
91-7806-000-03	2.9 mm	Sleeve Guía de 2.9mm

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

DISPOSITIVOS MÉDICOS
bioadvance[®]
— LATAM —

OVERFIX[®]
— SPORTS MEDICINE — by **Delta**



bioadvancelatam.com