



— SPORTS MEDICINE — *by Delta*



FASTABLE™ T-WING SUTURE ANCHOR

TÉCNICA QUIRÚRGICA

ANCLA DE FIJACIÓN T-WING CON O SIN AGUJA

FASTABLE™ T-WING SUTURE ANCHOR

CONTENIDO

FASTABLE TITANIUM SUTURE ANCHOR

Características	03
-----------------------	----

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Ancla T-Wing de 1.3 mm	04
Ancla T-Wing de 2.4 mm	05

CODIFICACIÓN

Ancla de Titanio Fastable	05
---------------------------------	----



FASTABLE™ T-WING SUTURE ANCHOR

CARACTERÍSTICAS

Ideal para la Reparación de Lesiones en Articulaciones Pequeñas. Presenta una estructura compacta que requiere un orificio pre-perforado más pequeño, proporcionando una resistencia confiable para reparaciones efectivas. Cumple con las necesidades de fijación clínica para reparaciones de articulaciones pequeñas. Adecuado para diversas indicaciones, incluyendo la mano, muñeca, codo, tobillo y pie.



FACILIDAD DE USO

Presenta una implantación tipo tap-in. Disponible en diseños con y sin aguja. Ahorra tiempo quirúrgico de manera efectiva.


SUTURA ULTRA FUERTE

Pre-cargada con fibra UHMWPE UHS™ para una resistencia superior. Diseñada para medicina deportiva con excelentes características mecánicas.



ANCLAJE ULTRA DELGADO

Disponible en diseños de doble ala o de cuatro alas, este anclaje tiene una especificación mínima de 1.3 mm. Está diseñado para orificios pre-perforados extremadamente delgados, asegurando un efecto de fijación confiable.

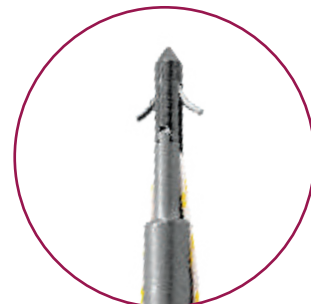

DIVERSOS DIÁMETROS DE ANCLAJE

Amplia gama de diámetros de anclaje: de 1.3 mm a 2.8 mm. Tamaños de sutura pre-cargados: #3-0 a #2. Disponible en suturas simples o dobles, con o sin aguja.

FASTABLE™ T-WING SUTURE ANCHOR

TÉCNICA QUIRÚRGICA | ANCLA DE 1.3 MM

SECUENCIA

01. PERFORACIÓN

Utiliza el taladro eléctrico para insertar la broca escalonada en el hueso hasta que el escalón esté al nivel de la superficie ósea.




02. INSERCIÓN DE ANCLA

Utiliza el martillo para golpear el ancla hasta que el inicio de la funda protectora quede por debajo de la superficie ósea.



03. LIBERACIÓN DE ANCLA

Libera el sutura y retira el mango. Completa la implantación del ancla.

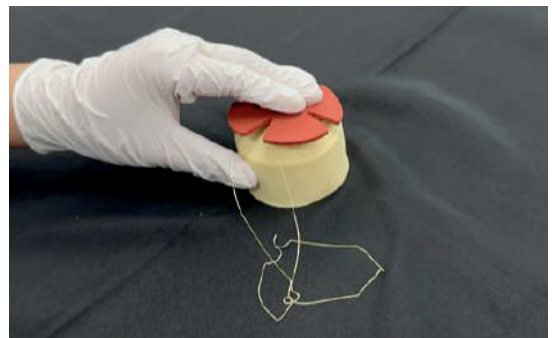


FASTABLE™ T-WING SUTURE ANCHOR

TÉCNICA QUIRÚRGICA | ANCLA DE 2.4 MM

SECUENCIA


01. PREPARACIÓN

Prepara el instrumental: la broca escalonada y la guía de perforación.

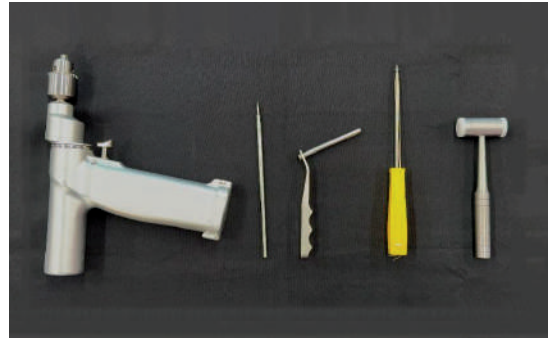


02. PERFORACIÓN

Inserta la broca escalonada a lo largo de la guía de perforación. Perfora hacia adelante hasta que el escalón esté al nivel de la entrada de la guía de perforación.

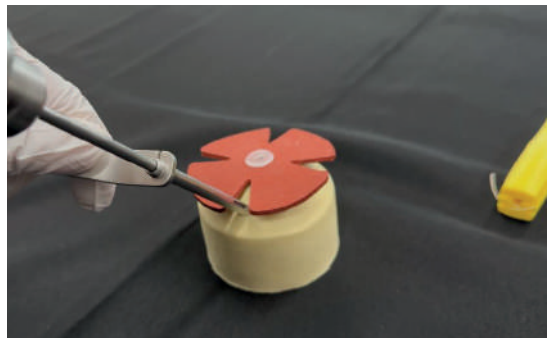


03. INSERCIÓN DE ANCLA

Utiliza el martillo para golpear el ancla hasta que el borde del escalón del ancla de sutura esté al nivel de la superficie ósea.

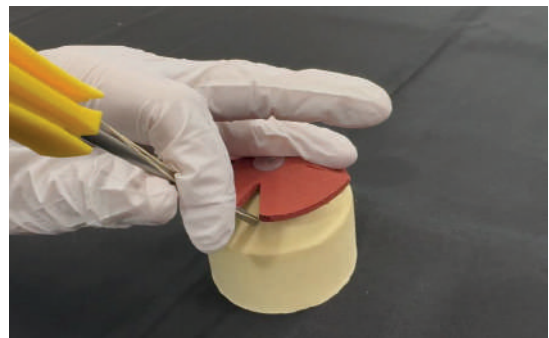

04. LIBERACIÓN DE ANCLA

Libera la sutura y retira el mango. Completa la implantación del ancla de sutura.

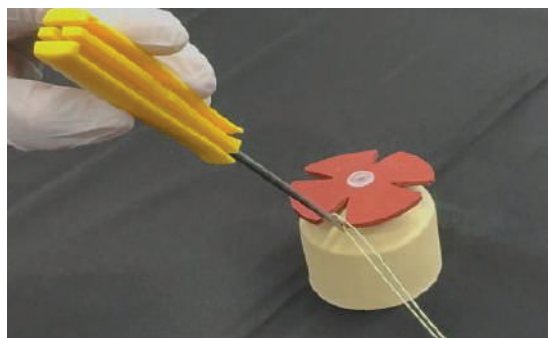

FASTABLE™ T-WING SUTURE ANCHOR

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE ANCLA FASTABLE

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
Familia Fastable T-Wing Con aguja				
91-7905-001-01	-	1.3 x 3.5 mm	Fastable™ T-wing Suture Anchor W/Needle	
91-7905-001-03	-	1.8 x 5.5 mm	Fastable™ T-wing Suture Anchor W/Needle	
91-7905-001-05	-	2.4 x 9.5 mm	Fastable™ T-wing Suture Anchor W/Needle	
91-7905-001-09	-	2.8 x 11 mm	Fastable™ T-wing Suture Anchor W/Needle	
Familia Fastable T-Wing Sin aguja				
91-7905-001-02	-	1.3 x 3.5 mm	Fastable™ T-wing Suture Anchor W/Needle	
91-7905-001-04	-	1.8 x 5.5 mm	Fastable™ T-wing Suture Anchor W/Needle	
91-7905-001-06	-	2.4 x 9.5 mm	Fastable™ T-wing Suture Anchor W/Needle	
91-7905-001-10	-	2.8 x 11 mm	Fastable™ T-wing Suture Anchor W/Needle	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

bioadvance[®]

DISPOSITIVOS MÉDICOS

LATAM

OVERFIX[®]

— SPORTS MEDICINE — by Delta



bioadvancelatam.com