



OVERFIX[®]

— SPORTS MEDICINE — *by Delta*

X-LOCK[®] KNOTLESS ANCHOR

CATÁLOGO ARGENTINA

ANCLA DE FIJACIÓN DE PEEK CON O SIN SUTURA | PEEK SUTURE ANCHOR OVERFIX
ANCLA DE FIJACIÓN DE TITANIO CON O SIN AGUJA | TITANIUM SUTURE ANCHOR OVERFIX

X-LOCK® KNOTLESS ANCHOR

ANCLA DE PEEK CON SUTURA | TOTALMENTE ROSCADA

El ancla de PEEK X-Lock está fabricado en Polietereetercetona (PEEK). Combina la excelente biocompatibilidad y bioestabilidad con la propiedad de ser radiolúcida.

Es recomendado un punzón para preparar el orificio en el hueso antes de la inserción. Para hueso duro es recomendable el punzón y el machuelo.



SOLIDEZ

El ancla X-Lock de PEEK provee excelente fuerza de fijación y estabilidad para cirugía artroscópica o técnicas de mini-open.

MATERIAL

El ancla es de material no absorbible para evitar la reacción adversa en tejidos blandos.

PERFIL

La rosca total en el cuerpo del ancla provee una excelente fuerza de Pull-Out y fijación estable para hueso cortical y esponjoso.



APLICACIÓN

En conjunto con las anclas i-Lock sin nudos, X-Lock se puede utilizar para la técnica de doble fila.



X-LOCK® KNOTLESS ANCHOR

ANCLA DE PEEK CON SUTURA | TAP IN

El material PEEK proporciona excelente transparencia radiográfica, evitando artefactos, lo que facilita la evaluación postoperatoria.

Buena biocompatibilidad, módulo elástico cercano al del hueso humano, lo que reduce el efecto de apantallamiento por estrés, manteniendo la resistencia ósea y promoviendo la cicatrización.



DISEÑO

Diseño del cuerpo del anclaje "Tap-in" para una fácil implantación, alta resistencia a la tracción, reduce efectivamente la aflojación y el deslizamiento del anclaje.

SUTURA

Precargado con sutura UHS #2 para medicina deportiva, diseño de sutura incorporada para prevenir el desgaste durante la implantación.



MATERIAL

El anclaje delgado de 3.0 mm con un diseño de vástago largo permite una fácil entrada en áreas profundas, adecuado para la reparación de lesiones labrales en el hombro y la cadera.



X-LOCK® KNOTLESS ANCHOR

ANCLA DE TITANIO CON SUTURA | TOTALMENTE ROSCADA

El ancla de titanio X-Lock está fabricado de aleación de titanio (TC4).

Viene precargado con sutura ultra resistente para garantizar una excelente fuerza de fijación y estabilidad en cirugías artroscópicas o técnicas de mini-open.



DIMENSIONES


Diámetros disponibles en 4.5 mm, 5.5 mm y 6.5 mm

DISEÑO ROSCADO

Diseño totalmente roscado para una mayor fuerza de pull-out. El diseño autoroscante facilita la colocación, por lo que se reduce el tiempo intraoperatorio.

PERFIL

El diseño autoroscante facilita la colocación, por lo que se reduce el tiempo intraoperatorio.

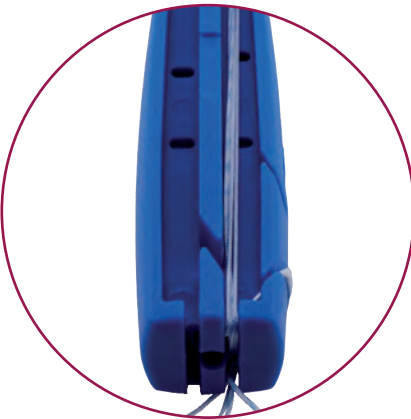

SUTURA PRECARGADA

Suturas precargadas dentro del ancla para minimizar el desgaste de la sutura durante la inserción.



X-LOCK® KNOTLESS ANCHOR | ANCLA CON SUTURA

CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN DE ANCLA DE PEEK

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
Familia X-Lock Suture Anchor Ancla de Peek				
91-7903-003-45	Hombro	4.5 x 17 mm	Ancla de PEEK con Sutura, 4.5 x 17 mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2 Blanca y Blanca-Azul.	 No. de Registro Sanitario 2479-20
91-7903-003-55	Hombro	5.5 x 17 mm	Ancla de PEEK con Sutura, 5.5 x 17 mm con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, Blanca y Blanca-Azul.	
91-7903-003-65	Hombro	6.5 x 17 mm	Ancla de PEEK con Sutura, 6.5 x 17 mm con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, Blanca y Blanca-Azul.	
91-7902-001-02	Hombro	4.5 x 17 mm	Ancla de PEEK con Sutura, 4.5 x 17 mm con 3 Suturas Ultra Resistentes #2, Blanca y Blanca-Azul y Azul.	

Familia X-Lock Suture Anchor Tap In Ancla de Peek				
91-7906-000-30	Hombro	3.0 x 11 mm	Ancla de sutura X-Lock PEEK, con 1 sutura UHS #2, blanco-azul	 No. de Registro Sanitario 2479-20
91-7906-000-31	Hombro	3.0 x 11 mm	Ancla de sutura X-Lock PEEK, con 1 sutura UHS #2, blanco-negro.	
91-7906-000-32	Hombro	3.0 x 11 mm	Ancla de sutura X-Lock PEEK, con 1 sutura UHS #2, blanco y blanco-azul.	
91-7906-000-33	Hombro	3.0 x 11 mm	Ancla de sutura X-Lock PEEK, con 1 sutura UHS #2, blanco y blanco-negro.	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

X-LOCK® KNOTLESS ANCHOR | ANCLA CON SUTURA

CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN DE ANCLA DE TITANIO

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
Familia X-Lock Suture Anchor Ancla de Titanio				
91-7901-004-02	Hombro	4.5 x 19 mm	Ancla de Titanio con Sutura, 4.5x19mm, con Sutura Ultra Resistente #2, 1000mm, Blanca-zul	  No. de Registro Sanitario 2479-21
91-7901-004-01	Hombro	4.5 x 19 mm	Ancla de Titanio con Sutura, 4.5x19mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000mm, Blanca y Blanca-Azul	
91-7901-004-03	Hombro	5.5 x 19 mm	Ancla de Titanio con Sutura, 5.5x19mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000mm, Blanca y Blanca-Azul	
91-7901-004-04	Hombro	6.5 x 20 mm	Ancla de Titanio con Sutura, 6.5x20mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000mm, Blanca y Blanca-Azul	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

DISPOSITIVOS MÉDICOS
bioadvance[®]
LATAM

OVERFIX[®]
— SPORTS MEDICINE — *by Delta*



bioadvancelatam.com