OVERFIX®

SPORTS MEDICINE — by Delta



i-LOCK® KNOTLESS ANCHOR

TÉCNICA QUIRÚRGICA

ANCLA DE FIJACIÓN DE PEEK CON O SIN SUTURA

ANCLA DE FIJACIÓN DE TITANIO CON O SIN SUTURA

I-LOCK® KNOTLESS ANCHOR

CONTENIDO

I-LOCK KNOTLESS ANCHOR

Características ---- 03

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Ancla de Titanio sin nudos Twist In ---- 04

Ancla de Peek sin nudos Twist In ---- 05

Ancla de Peek sin nudos Tap In ---- 06

CODIFICACIÓN

I-Lock Knotless Anchor ---- 07

Instrumental ---- 08




i-LOCK® KNOTLESS ANCHOR

CARACTERÍSTICAS

Las anclas i-Lock pueden utilizarse en lesiones de manguito rotador, reparación de ligamentos colaterales (lateral y medial) y diferentes tipos de lesiones en ligamentos.

La técnica quirúrgica de i-Lock ahorra pasos y tiempo valioso dentro de la cirugía, además con su bajo perfil permite una fijación suave lo que elimina la posibilidad de pinzamiento del nudo.



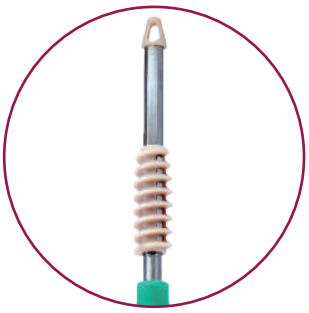

ANCLA DE PEEK TWIST IN

El ancla i-Lock PEEK consta de una punta y un cuerpo totalmente roscado lo que provee al implante de una mejor fuerza de Pull-Out.



ANCLA DE TITANIO TWIST IN

El titanio como material provee de una alta fuerza de Pull-Out para una mejor fijación.
El cuerpo del ancla tiene el diseño de rosca sin filo lo que evita la posibilidad de cortar la sutura.



ANCLA DE PEEK TAP IN

El diseño permite ajuste de tensión intraoperatoria mientras se asegura la correcta reducción y fijación del tejido.


i-LOCK® KNOTLESS ANCHOR | TWIST IN

TÉCNICA QUIRÚRGICA | ANCLA DE TITANIO SIN NUDOS

SECUENCIA


01. INSERCIÓN DE SUTURA EN ANCLA

El pasador de bucle de sutura se inserta en la punta del anclaje sin nudo. Pase todas las hebras de sutura a través del pasador de bucle. Guíe las hebras de sutura a través del ojo del anclaje sin nudo tirando del pasador de bucle.

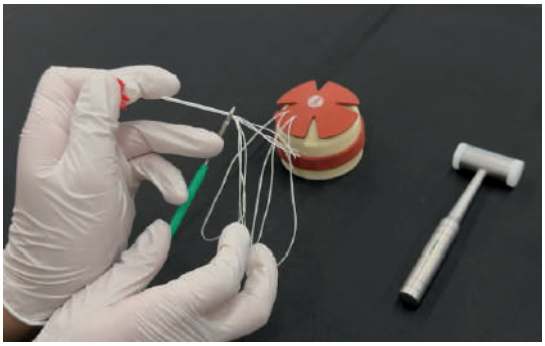


02. POSICIONAMIENTO DE ANCLA

Utilice el martillo para golpear la punta del anclaje hasta que la marca láser quede a nivel de la superficie ósea o ligeramente por debajo de ella.

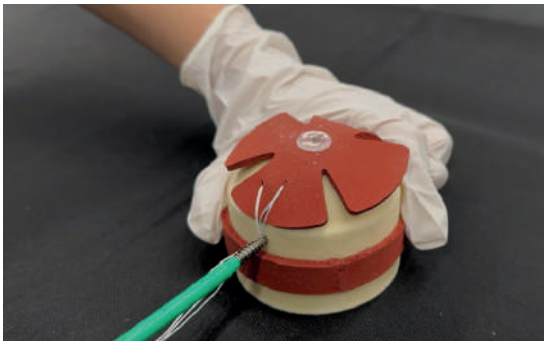


03. MANIOBRA DE ANCLA

Gire el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que la marca láser quede a nivel de la superficie ósea o ligeramente por debajo de ella.

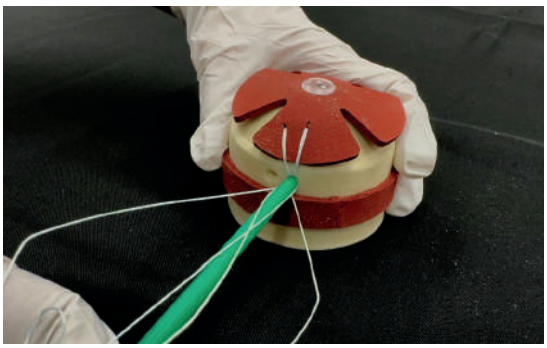

04. LIBERACIÓN DE SUTURA

Libere la sutura del mango y retire el mango. Complete la implantación del anclaje sin nudo i-Lock™ Titanium Twist-in.

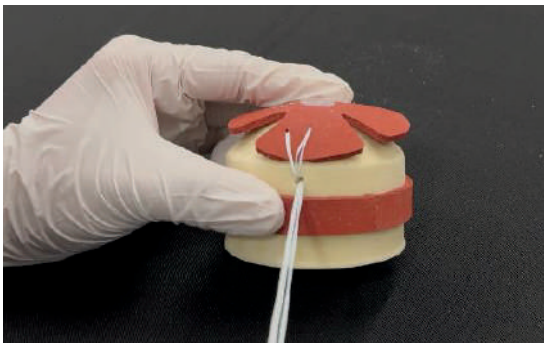


i-LOCK® KNOTLESS ANCHOR | TWIST IN

TÉCNICA QUIRÚRGICA | ANCLA DE PEEK SIN NUDOS

SECUENCIA


01. INSERCIÓN DE PUNZÓN

Inserte el punzón i-Lock™ Twist-in en la cavidad articular con su punta apoyada en el sitio de implantación. Utilice un martillo para avanzar el punzón en el hueso hasta que la línea de marcado quede a nivel de la superficie ósea o ligeramente por debajo de ella.

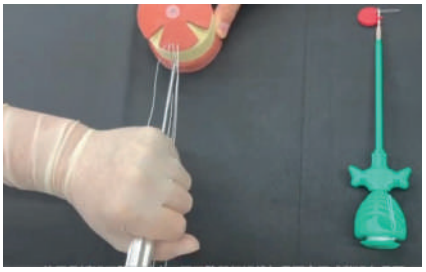

02. POSICIONAMIENTO DE ANCLA


Seleccione el escariador i-Lock™ Twist-in que corresponda al tamaño del anclaje. Gire el escariador i-Lock™ Twist-in en el sentido de las agujas del reloj para escariar el hueso hasta que la línea de marcado quede a nivel de la superficie ósea o ligeramente por debajo de ella.

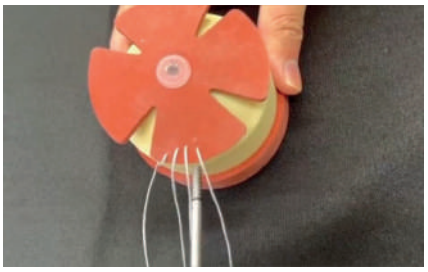

03. INSERCIÓN DE SUTURA


El alambre del bucle de sutura se instala en la punta del anclaje sin nudo. Pase todas las hebras de sutura a través del alambre del bucle.

Guíe las hebras de sutura a través del ojo del anclaje sin nudo tirando del alambre del bucle.

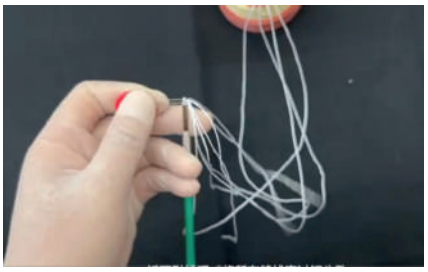

04. MANIOBRA DE ANCLA

Inserte el anclaje sin nudo i-Lock™ Twist-in en la cavidad articular. Gire el mango de extremo redondo en el sentido de las agujas del reloj hasta que la marca láser quede a nivel de la superficie ósea o ligeramente por debajo de ella.

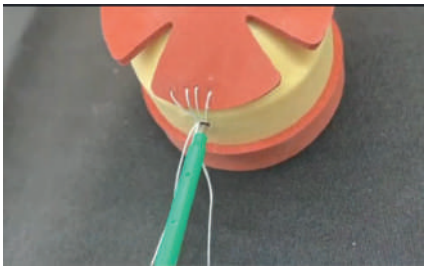

05. LIBERACIÓN DE SUTURA

Libere la sutura del mango y retire el mango. Complete la implantación del anclaje sin nudo i-Lock™ Twist-in.




i-LOCK® KNOTLESS ANCHOR | TAP IN

TÉCNICA QUIRÚRGICA | ANCLA DE PEEK SIN NUDOS

SECUENCIA


01. COLOCACIÓN DE GUÍA

Coloca la Guía de Taladro i-Lock™ con Obturador Romo y elige la ubicación de implantación del ancla.

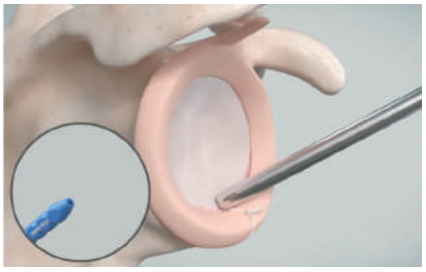


02. PERFORACIÓN

Usa la Broca Escalonada i-Lock™. Taladra hacia adelante hasta que el límite de profundidad haga contacto con la Guía de Taladro.

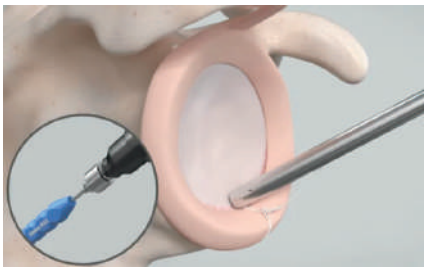


03. INSERCIÓN DE SUTURA

El lanzador de bucle de sutura está instalado en la punta del ancla sin nudo. Pasa todas las hebras de sutura a través del lanzador de bucle. Guía las hebras de sutura a través del ojal del ancla sin nudo tirando del lanzador de bucle.

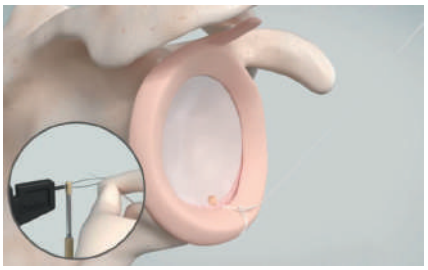


04. POSICIONAMIENTO DE ANCLA

Inserta el ancla sin nudo i-Lock™ Tap-in en la cavidad articular. Golpea el mango del ancla con un mazo de hueso hasta que la marca láser quede al ras con la superficie del hueso o ligeramente sumergida en la superficie del hueso.

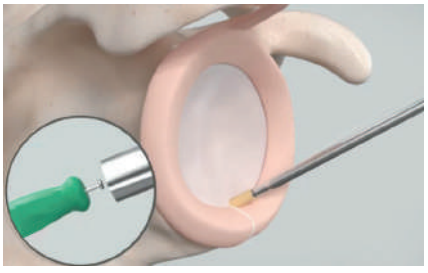

05. MANIOBRA DE ANCLA

Desenrosca el ancla en sentido contrario a las agujas del reloj, corta el exceso de hilo y completa la implantación del ancla sin nudo i-Lock™ Tap-in.

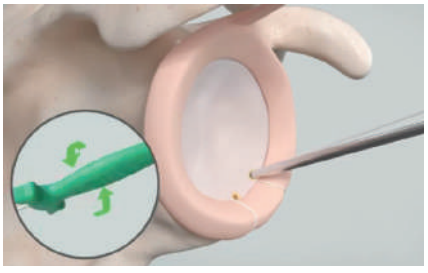

i-LOCK® KNOTLESS ANCHOR TWIST IN

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE ANCLA TWIST IN

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
91-7901-005-01	Hombro Rodilla Tobillo	4.75 x 24.5 mm	Ancla de Titanio Knotless, Twist-in, 4.75x24.5mm, con Sutura Ultra Resistente #2, 1000mm, Blanca-Azul	
91-7903-002-47	Hombro Rodilla Tobillo	4.75 x 19 mm	Ancla de PEEK sin Nudos, Giratoria, 4.75 x 19 mm, con Sutura Ultra Resistente #2, Blanca-Azul	
91-7903-002-55	Hombro Rodilla Tobillo	5.5 x 19 mm	Ancla de PEEK sin Nudos, Giratoria, 5.5 x 19 mm, con Sutura Ultra Resistente #2, Blanca-Azul	



CODIFICACIÓN DE ANCLA TAP IN

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
91-7906-000-26	Hombro Rodilla Tobillo	2.5 x 8 mm	Ancla de PEEK sin Nudos. Roscada. 2.5 x 8 mm	
91-7903-001-30	Hombro Rodilla Tobillo	3.0 x 16 mm.	Ancla de PEEK sin Nudos, Roscada, 3.0 x 16 mm	
91-7903-001-35	Hombro Rodilla Tobillo	3.5 x 19 mm	Ancla de PEEK sin Nudos, Roscada, 3.5 x 19 mm	
91-7903-001-45	Hombro Rodilla Tobillo	4.5 x 24 mm	Ancla de PEEK sin Nudos, Roscada, 4.5 x 24 mm.	



BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

i-LOCK® KNOTLESS ANCHOR TAP IN

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL | I-Lock™, Twist-in

91-7805-000-80	4.75/5.5 mm	Punzón para i-Lock™, Twist-in 4.75 / 5.5mm
91-7805-000-99	4.75/5.5 mm	Machuelo para i-Lock™, Twist-in 4.75/5.5mm

CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL | I-Lock™ Tap in

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
91-7805-000-64	3 mm	Broca para i-Lock™, Tap-in 3.0mm
91-7805-000-57	3 mm	Guía de Broca para i-Lock™, Tap-in 3.0mm
91-7805-000-65	3.5 mm	Broca para i-Lock™, Tap-in 3.5mm
91-7805-000-58	3.5 mm	Guía de Broca para i-Lock™, Tap-in 3.5mm
91-7805-001-18	3.5 mm	Punzón para i-Lock Tap-in, 3.5mm
91-7805-000-79	4.5 mm	Punzón para i-Lock™, Tap-in 4.5mm
91-7805-000-92	2.5 mm	Broca Escalonada de 2.0mm, para i-Lock, 2.5mm
91-7805-001-02	2.5 mm	Guía de Broca para i-Lock, 2.5mm
91-7805-001-04	2.5 mm	Punzón para i-Lock, 2.5mm

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

DISPOSITIVOS MÉDICOS

bioadvance®

LATAM

OVERFIX®

SPORTS MEDICINE — by Delta

AK MEDICAL REPRESENTANTE EXCLUSIVO | jri Ortopedia | OVERFIX® TRAUMA | OVERFIX® | OVERFIX® SPORTS MEDICINE | OVERFIX® POWER TOOLS



CHAMBER MEXICO CHINA | CERTIFIED ISO 13485 | CE | FDA | TÜV

COFEPRIS COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS | AGEMED | anmat Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica | Instituto de Salud Pública Ministerio de Salud

bioadvancelatam.com