OVERFIX®

SPORTS MEDICINE — by Delta



V-LOCK® ALL SUTURE ANCHOR

TÉCNICA QUIRÚRGICA

DISPOSITIVO DE FIJACIÓN DE TEJIDO BLANDO A HUESO

V-LOCK® ALL SUTURE ANCHOR

CONTENIDO

V-LOCK KNOTLESS ANCHOR

Características ---- 03

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Ancla solo Sutura ---- 04

CODIFICACIÓN

V lock all suture Anchor ---- 05

Instrumental ---- 06



V-LOCK® ALL SUTURE ANCHOR

CARACTERÍSTICAS

El anclaje todo-sutura V-Lock™ es adecuado para la fijación de tendones y huesos en las articulaciones del hombro, rodilla, cadera y tobillo.

El cuerpo del anclaje todo-sutura presenta una excelente resistencia a la tracción y biocompatibilidad, además de ser propicio para cirugías de revisión.

El cuerpo del anclaje ultradelgado, con mínima remoción ósea, permite la implantación de múltiples anclajes y logra una cobertura tisular de rango completo.

La varilla de inserción flexible, combinada con una guía curva, permite alcanzar el mejor ángulo de implantación*.

*Varilla de inserción flexible de 1.3 mm/1.8 mm.



ANCLA SOLO SUTURA





RECUPERACIÓN

El cuerpo suave del ancla previene revisiones postoperatorias además de tener una excelente fuerza de fijación.

DIMENSIÓN

El tamaño del implante extremadamente pequeño permite el uso de múltiples anclas en la zona.

FIJACIÓN

El diseño de bajo perfil permite más fijación entre tendón y hueso. La broca de 1.3 mm minimiza la pérdida ósea.

INSERCIÓN

El diseño flexible del insertador se complementa con la guía de broca flexible para obtener un mejor ángulo de inserción.


V-LOCK® ALL SUTURE ANCHOR

TÉCNICA QUIRÚRGICA | ANCLA SOLO SUTURA

SECUENCIA


01. COLOCACIÓN DE GUÍA

Coloque la Guía de Perforación V-Lock™ con Obturador Romo y seleccione la ubicación de implantación del anclaje.

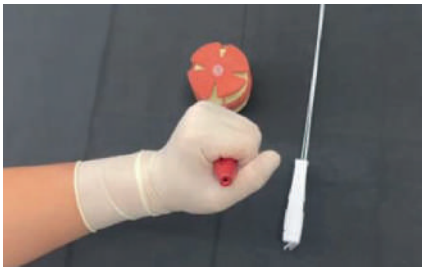


02. INSERCIÓN DE OBTURADOR

Inserte el Obturador Afilado a lo largo de la Guía de Perforación; utilice el Martillo para golpear el Obturador Afilado hasta que su límite de profundidad contacte con la Guía de Perforación. (Consejo: El Obturador Afilado solo es adecuado para áreas con hueso duro o en pacientes varones adultos jóvenes).

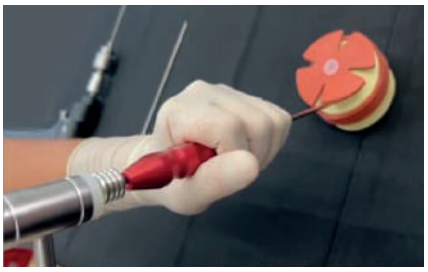


03. PERFORACIÓN

Utilice la Broca Escalonada V-Lock™. Perfore hacia adelante hasta que el límite de profundidad entre en contacto con la Guía de Perforación.

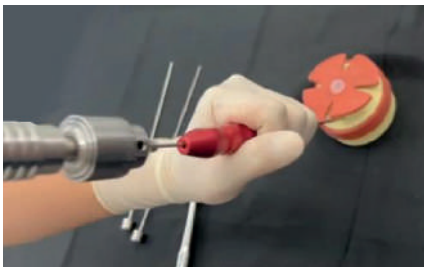


04. COLOCACIÓN DE ANCLA

Inserte el anclaje todo-sutura V-Lock™ del tamaño correspondiente a través de la Guía de Perforación. Golpee el mango del anclaje con el Martillo hasta que el mango del anclaje contacte con el extremo de la guía.

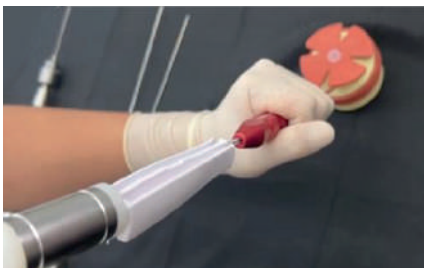

05. LIBERACIÓN DE SUTURAS

Libere las suturas del mango. Retire el mango y la Guía de Perforación conjuntamente de la cavidad articular. Agarre todos los cabos de sutura y tire de ellos conjuntamente, aplicando tensión continua.

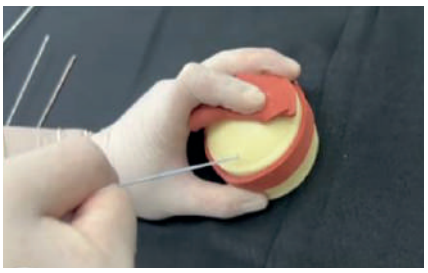

V-LOCK® ALL SUTURE ANCHOR

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE ANCLA SOLO SUTURA

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
91-7906-131-55	Hombro Codo Tobillo	1.3 x 15mm	Ancla solo Sutura, 1.3 x 15mm, con Sutura Ultra Resistente #2, 1200mm, Blanca-Azul
91-7906-181-52	Hombro Codo Tobillo	1.8 x 15mm	Ancla solo Sutura, 1.8 x 15mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1200mm Blanca y Blanca-Azul
91-7906-181-53	Hombro Codo Tobillo	1.8 x 15mm	Ancla solo Sutura, 1.8 x 15mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000mm, Blanca y Blanca-Azul, con Agujas ø arco 11x17mm
91-7906-251-54	Hombro Codo Tobillo	2.5 x 15 mm	Ancla solo Sutura, 2.5 x 15 mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1100 mm, Blanca y Blanca-Azul
91-7906-251-55	Hombro Codo Tobillo	2.5 x 15 mm	Ancla solo Sutura, 2.5 x 15 mm, con 3 Suturas Ultra Resistentes #2, 1100 mm, Blanca y Blanca-Azul y Azul
91-7906-251-56	Hombro Codo Tobillo	2.5 x 15 mm	Ancla solo Sutura, 2.5 x 15 mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000 mm, Blanca y Blanca-Azul, con Agujas ø arco 11x17mm
91-7906-301-54	Hombro	3.0 x 15 mm	Ancla solo Sutura, 3.0 x 15 mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1100 mm, Blanca y Blanca-Azul
91-7906-301-55	Hombro	3.0 x 15 mm	Ancla solo Sutura, 3.0 x 15 mm, con 3 Suturas Ultra Resistentes #2, 1100 mm, Blanca y Blanca-Azul y Azul
91-7906-301-56	Hombro	3.0 x 15 mm	Ancla solo Sutura, 3.0 x 15 mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000mm, Blanca y Blanca-Azul, con Agujas ø arco 11x17mm



CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL | 1.3 mm V-Lock™ All-Suture Anchor

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	IMAGEN
91-7805-000-69	1.3 mm	Broca Flexible de 1.3mm	
91-7805-000-74	1.3 mm	Obturador Afilado de 1.3mm	
91-7805-000-71	1.3 mm	Obturador de punta Roma de 1.3mm	
91-7805-000-59	1.3 mm	Guía de Broca de 1.3mm, Corona	
91-7805-000-54	1.3 mm	Guía de Broca de 1.3mm, Boca de Pez	
91-7805-000-62	1.3 mm	Guía de Broca Curva de 1.3mm, 15°	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

V-LOCK® ALL SUTURE ANCHOR

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL | 1.8 mm V-Lock™ All-Suture Anchor

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	IMAGEN
91-7805-000-70	1.8 mm	Broca Flexible de 1.8mm	
91-7805-000-74	1.3 mm	Obturador Afilado de 1.3mm	
91-7805-000-72	1.8mm	Obturador de punta Roma de 1.8mm	
91-7805-000-60	1.8mm	Guía de Broca de 1.8mm, Corona	
91-7805-000-55	1.8mm	Guía de Broca de 1.8mm, Boca de Pez	
91-7805-000-63	1.8mm	Guía de Broca Curva de 1.8mm, 15°	

CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL | 2.5 / 3.0 mm V-Lock™ All-Suture Anchor

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	IMAGEN
91-7805-000-66	2.5 mm	Broca de 2.5mm	
91-7805-000-67	3 mm	Broca de 3.0mm	
91-7805-000-75	2.5 mm	Punzón de 2.5mm	
91-7805-000-76	3 mm	Punzón de 3.0mm	
91-7805-000-73	2.5/3 mm	Obturador de punta Roma de 2.5/3.0mm	
91-7805-000-61	2.5/3 mm	Guía de Broca de 2.5/3.0mm, Corona	
91-7805-000-56	2.5/3 mm	Guía de Broca de 2.5/3.0mm, Boca de Pez	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

DISPOSITIVOS MÉDICOS

bioadvance®

LATAM

OVERFIX®

SPORTS MEDICINE — by Delta

AK MEDICAL REPRESENTANTE EXCLUSIVO | jri Ortopedia | OVERFIX® TRAUMA | OVERFIX SPINE | OVERFIX® SPORTS MEDICINE | OVERFIX® POWER TOOLS



CHAMBER MEXICO CHINA | CERTIFIED ISO 13485 | CE | FDA | TÜV

COFEPRIS COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS | AGEMED | anmat Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica | Instituto de Salud Pública Ministerio de Salud

bioadvancelatam.com